Alert-iT-mottaker

Brukerveiledning

Dette dokumentet gjelder for:
Modell: **P202 (4- og 128-kanals medisinsk mottaker)**
Produktversjon: **v1 og v2**
Fastvare: **v1.1.***

Alert-iT og Alert-iT-logoen er enten registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører iTs Designs Ltd.
Copyright @ 2026 iTs Designs Ltd.
Med enerett.

UH1518-NOR Brukerveiledning for P202-mottaker. Versjon: 1.2.1 [23. okt. 2026]

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
INNLEDNING	4
Beskrivelse av produktet	4
Tiltenkt formål	4
Indikasjoner for bruk	4
Tiltenkte brukere og bruksmiljø	4
Tiltenkt pasientgruppe	4
Kontraindikasjoner	4
Enhetens levetid	5
SIKKERHET	5
Viktig informasjon	5
Sikkerhetsdefinisjoner	5
Alvorlige hendelser	5
Samsvar med krav til medisinsk utstyr	5
Utilsiktet justering av innstillinger	5
Produktansvar	6
Forsiktighetsregler	6
Rådføring med helsepersonell	7
Forklaring på merkingen på enheten og i dokumentasjonen	8
INNHOLD I ESKEN	9
Kompatible produkter	9
OVERSIKT OVER SYSTEMET	9
Alert-iT-mottaker	9
Statuslamper	9
Ladefeil	10
Mottakerfunksjoner	10
Alarmvarsler	11
Tilbakestille alarmer	11
Alarmvarighet	11
Bruk av Standard og Diskret modus	12
Feilsikker radio	12
FØRSTEGANGSOPPSETT	12
Bruk av belteklips og halssnor	12
Lading	12
Rekkeviddetesting	13
GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER	13
Slå på mottakeren	13
Vekke skjermen	13
Slå av mottakeren	13
Reagere på alarmvarsler	13
TILLEGGSFUNKSJONER	14
Tilbakestille alarmer fra utilgjengelige enheter	14
Kommunikasjon mellom mottakere (kun 128-kanals)	14
Assistanseanrop (kun 128-kanals)	14
Hjelp-anrop (kun 128-kanals)	14
ANBEFALTE KONFIGURASJONER	15
Bolig med én enhet	15
Mindre pleieinstitusjon med flere enheter og én mottaker	15
Mellomstor pleieinstitusjon med flere enheter og flere mottakere	15
PARE ENHETER	16
Oversikt over paring	16
Forstå navn og plasseringer	16
Legge til en ny enhet	16
Fjerne en enhet	16
Deaktivere en enhet	16
BATTERISTATUS OG LEVETID	17
AVANSERT MENY > INNSTILLINGER FOR MOTTAKERE	17
RENGJØRING	18
PRODUSENTENS ANSVAR	18
KASSERING AV ENHETEN VED ENDT LEVETID	18
SAMSVARSERKLÆRING	19
RUTINEMESSIGE KONTROLLER	19
Daglige kontroller	19
Ukentlige kontroller	19
KLARGJØRING AV ENHETEN FØR GJENBRUK	19
ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI	20
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	22

1 INNLEDNING

Denne bruksanvisningen beskriver bruken av **mottaker** fra Alert-iT.

Produktversjonen denne bruksanvisningen gjelder for, er vist på forsiden av dette dokumentet. Denne skal henvises til og sammenlignes med **produktversjonsnummeret** på produktinformasjonsetiketten øverst på enheten. Hvis dette dokumentet ikke er egnet for produktet ditt, må du se i delen Støtte på nettstedet vårt for alternative instruksjoner.

- Følg alle instruksjoner om førstegangsoppsett, bruk, rengjøring og kassering av enheten i dette dokumentet.
- **Mottakeren** er et tilbehør til medisinsk utstyr.

1.1 Beskrivelse av produktet

Mottakeren brukes til å varsle pleiere om alarm- og feilvarsler fra parede enheter og sendere.

Denne brukerveiledningen forutsetter at mottakeren konfigureres før den brukes av en leder/primærpleier, slik at den fungerer med alle enhetene i hjemmet eller pleieinstitusjonen, samt at riktig driftsprotokoll er aktivert. Denne håndboken beskriver en rekke standardprotokoller som kan være relevante, samt mer generelle kontrollfunksjoner som er tilgjengelige for de to brukernivåene.

Pleiere varsles med visuelle, hørbare og vibrerende varsler (hvis aktivert).

Driftsmiljøet er vanligvis et soverom i et hjem eller på en institusjon.

1.2 Tiltenkt formål

Alert-iT-mottaker er ment å bistå i pleie ved å varsle pleieren om å se til pasienten for å kontrollere at vedkommende har det bra.

1.3 Indikasjoner for bruk

Denne enheten er utviklet og produsert som et sosialt hjelpemiddel som kun er beregnet på å bli brukt som et hjelpemiddel for en pleier.

Den har som formål å øke pleiernes årvåkenhet overfor de belastende følgetilstandene ved ulike lidelser og individuelle pleiebehov. Systemet overvåker ikke vitale fysiologiske prosesser og skal ikke forventes å diagnostisere noen sykdom eller forutsi debut av noen symptomer.

1.4 Tiltenkte brukere og bruksmiljø

Produktet er beregnet på å bli brukt som et hjelpemiddel for pleiere. Brukeren kan være en lekperson, eller helsepersonell.

Produktet er beregnet på å brukes i ulike settinger, inkludert i hjemmemiljø og på institusjoner.

1.5 Tiltenkt pasientgruppe

Bruken av produktet er ikke begrenset til en bestemt pasientgruppe.

1.6 Kontraindikasjoner

Det er ingen kontraindikasjoner.

1.7 Enhetens levetid

Ved normal bruk i et hjemmemiljø har mottakeren vanligvis en forventet levetid på **5 år**.

Mottakeren må skiftes ut etter denne perioden eller tidligere, hvis

1. det på annen måte gis instruksjon om det
2. hvis det observeres skade på enheten

Se **side 18** for veiledning om resirkulering. Hvis det observeres sprekker eller strukturelle skader, må du slutte å bruke mottakeren og skifte den umiddelbart.

2 SIKKERHET

2.1 Viktig informasjon

Før du bruker produktet, må du lese og forstå innholdet i denne brukerveiledningen.

2.2 Sikkerhetsdefinisjoner

⚠	ADVARSEL: Risiko for alvorlig personskade dersom instruksjonene ikke følges.
⚠	FORSIKTIG: Det er risiko for skade på produktet dersom instruksjonene ikke følges.
ⓘ	MERK: Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.3 Alvorlige hendelser

Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og fagmyndigheten i EU-medlemslandet/landet der brukeren og/eller pasienten holder til.

Med «alvorlig hendelse» menes alle hendelser som direkte eller indirekte førte til, kan ha ført til eller kan føre til ett eller flere av følgende:

- dødsfallet til en pasient, bruker eller annen person
- midlertidig eller permanent alvorlig reduksjon av helsetilstanden til en pasient, bruker eller annen person
- alvorlig trussel mot folkehelsen

Produsentens kontaktinformasjon er oppgitt på baksiden av dette dokumentet.

2.4 Samsvar med krav til medisinsk utstyr

Alert-iT medisinsk mottaker markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for pleiere. Den oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinsk utstyr.

2.5 Utilsiktet justering av innstillinger

Endring av radio-ID (uten å også endre den på mottakerutstyret) vil føre til en melding om radiofrekvensfeil på mottakerutstyret, og eventuelle alarmvarslinger som følge av dette vil ikke lenger mottas.

2.6 Produktansvar

Dette Alert-iT-produktet er designet med tanke på pålitelighet og integritet. Selv om det er en svært følsom metode for varsling, er det alltid mulig at en nødstilstand ikke registreres av en rekke årsaker (inkludert funksjonssvikt). I livstruende situasjoner anbefales det å bruke Alert-iT-systemet i kombinasjon med andre teknikker. Hverken produsenten eller produsentens representant kan bære et juridisk ansvar for å levere et feilfritt system.

Produktet er utviklet og risikovurdert i henhold til ISO 14971. Håndboken og de tekniske spesifikasjonene er utarbeidet i henhold til sikkerhetsvurderingene i risikoanalysen. Ta alltid hensyn til sikkerheten når du bruker produktet. Alert-iT tar ikke ansvar for konsekvenser som følge av feil bruk eller installasjon av produktet. Enhver form for skade på eller manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og fritar produsenten for ansvar. Produktets estimerte levetid gjelder når det brukes i samsvar med tiltenkt bruk og vedlikeholdsinstruksjonene.

2.7 Forsiktighetsregler

⚠ ADVARSEL:

- Hvis en ytre kraft ødelegger AC-adapteren og deler blir sittende igjen i stikkontakten, kan det føre til elektrisk støt.
- Sørg for at strømledningene rutes og festes slik at de ikke utgjør en fare for at noen kan snuble, sitte fast eller kveles av dem.
- Pleieren må aldri slå av en alarm uten å kontrollere pasientens tilstand.

⚠ ADVARSEL: I henhold til IEC 60601-1-2 (EMC)

- Unngå å bruke dette utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr, da dette kan føre til funksjonsfeil. Hvis slik bruk er nødvendig, må dette utstyret og det andre utstyret observeres for å bekrefte at de fungerer normalt.
- Bruk av tilbehør, transdusere og kabler som ikke er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og føre til funksjonsfeil.
- Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) fra noen deler av Alert-iT-mottakeren, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen til dette utstyret bli redusert.

⚠ ADVARSEL: I henhold til IEC 60601-1 Sikkerhet

- Det er ikke tillatt å foreta noen endringer på dette utstyret.

⚠ FORSIKTIG:

- Må ikke brukes hvis mottakeren eller enhetene er skadet.
- Ikke bruk utstyret i sterke elektromagnetiske felt.
- Ikke bruk produktet i miljøer med brennbare anestesiblandinger, oksygen eller lystgass.
- Koble fra strømforsyningen før rengjøring.
- Bruk bare mottakeren med tilbehør som er godkjent for bruk med dette produktet og kun i henhold til instruksjonene.
- Ikke prøv å reparere enheten selv.
- Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk, eller når den skal lagres over en lengre periode.
- Ikke bruk ikke-oppladbare batterier. Alkaliske batterier kan overopphetes og ødelegge enheten.

MERK:

- Denne enheten er bare beregnet på å bli brukt som et hjelpemiddel for en pleier. Produktet må ikke erstatte menneskelig tilsyn.
- Sørg for at bruksanvisningen gjelder for den enheten som brukes, dvs. at enheten har det samme delenummeret som er angitt på forsiden.
- Enheten skal bare brukes av pleiere med nødvendig kunnskap og skal ikke brukes av operatører som ikke forstår innholdet i denne håndboken.
- Pleieren er ansvarlig for å vurdere risikoene ved bruk av dette utstyret og alle innstillingene tilknyttet utstyret.
- Batteriene i mottakeren kan bare lades dersom mottakeren er koblet til en 5 V USB-strømforsyning som kan levere minst 500 mA.
- Ikke bruk denne enheten til noen andre formål enn det som er angitt av produsenten.
- Justering av volumet kan medføre at varslingslyden ikke blir hørt.
- Test alltid enheten før bruk og når innstillingene justeres.
- Enheten må testes regelmessig som beskrevet i denne bruksanvisningen. Utfør tester for å kontrollere at alarmvarslene mottas på stedet/stedene der pleieren oppholder seg. Se **side 19**.
- Det må utføres en risikovurdering for å fastslå om systemets pålitelighet er på et nivå som er tilstrekkelig, eller om det er behov for ekstra utstyr. Sannsynligheten for at pasienten tukler med systemet må vurderes.
- Det er ikke tillatt å utføre noen form for vedlikehold på enheten mens den er i bruk.
- Hver del må rengjøres og desinfiseres i henhold til informasjonen på **side 18**.
- Noe av tilbehøret er utstyrt med små skruer og har plastposer. Sørg for at disse oppbevares utilgjengelig for sårbare personer som kan kveles av dem.
- Som med alt elektronisk utstyr, er det en mulighet for at utstyret kan forstyrre eller påvirkes av forstyrrelser fra andre elektriske eller elektroniske enheter. Derfor må du unngå å plassere enheten, sensoren eller tilkoblingskabler nær følsomme elektroniske enheter eller enheter som skaper kraftige elektromagnetiske felter, som radiosendere, mobiltelefoner eller strømkabler.
- Det kreves ingen instruksjoner for å opprettholde grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse med hensyn til elektromagnetiske forstyrrelser gjennom forventet levetid.

2.8 Rådføring med helsepersonell

Ring nødetatene når umiddelbar medisinsk hjelp er nødvendig.

Det er viktig å rådføre seg med helsepersonell

- hvis du er usikker på om enheten (eller en kompatibel enhet) er egnet for pasientens tilstand
- hvis pasienten opplever endringer i symptomene sine, for eksempel symptomtype eller varighet

2.9 Forklaring på merkingen på enheten og i dokumentasjonen


Se denne bruksanvisningen før bruk.


Dette er et medisinsk utstyr.


Unik enhetsidentifikasjon.


Partikode.


Serienummer.


Katalognummer.


Produsent.


Produksjonsdato.


Autorisert representant i Den europeiske union.


Holdes tørr.


Knuselig, må håndteres forsiktig.


Temperaturbegrensning.


Fuktighetsbegrensning.


Begrensning for atmosfærisk trykk.

IP64 Angir kapslingsgraden for enheten.


Likestrøm.


Forsiktig: Se sikkerhetsinformasjonen i denne bruksanvisningen.


Se bruksanvisningen.


CE-merke. (Produktet oppfyller de generelle kravene til sikkerhet og ytelse i vedlegg I til forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr).


UKCA-merke. (Produktet overholder de vesentlige kravene i forordningen for medisinsk utstyr for Storbritannia 2002).


Symbolet for det europeiske direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet) 2012/19/EU.

RoHS Indikerer at produktet overholder det europeiske direktivet 2011/65/EU om begrenset bruk av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (vanligvis kalt RoHS-direktivet eller direktiv om begrensning av farlige stoffer).


Importørinformasjon.

3 INNHOLD I ESKEN

Pakken inneholder følgende:

1 stk. **Alert-iT-mottaker**	[Delenr.: P202]
2 stk. **oppladbare AAA-batterier [Ni-MH 1,2 V]** (montert)	[Delenr.: P160G]
1 stk. **belteklips**	[Delenr.: P204A]
1 stk. **halssnor**	[Delenr.: P204B]
1 stk. **5 V USB-lader** (inkluderer 1,5 m USB Type-C-kabel)	[Delenr.: P167*B]


3.1 Kompatible produkter

Mottakeren er kompatibel med alle Safelink™-radioenheter og -sendere fra Alert-iT.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte leverandøren av utstyret.

4 OVERSIKT OVER SYSTEMET

4.1 Alert-iT-mottaker

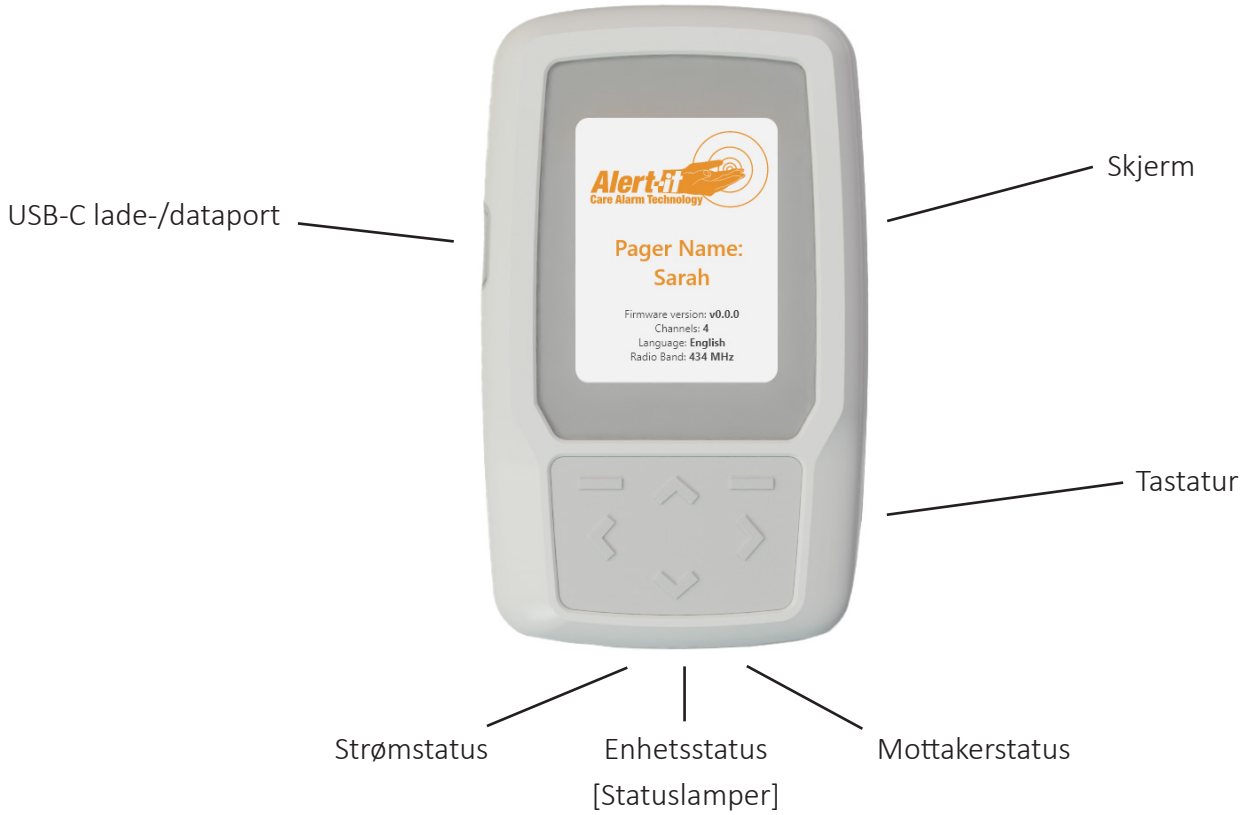

4.2 Statuslamper

Strømstatus:	Blinker grønt = lader	Lyser konstant grønt = fulladet	Blinker rødt = kritisk batteri
	Lyser konstant rødt = ladefeil (*se avsnitt 4.3)		
Enhetstatus:	Blinker gult = feil / alarm med lav eller middels prioritet		Blinker rødt = alarm med høy prioritet
Mottakerstatus:	Blinker gult = feil i radioforbindelsen	Blinker rødt = aktivt assistanse- eller hjelp-anrop	

4.3 Ladefeil

Dersom det er et ladeproblem, indikeres dette av mottakeren. For eksempel hvis mottakeren lades uten at batterier er montert.

Merk: Hvis mottakeren har vært ubrukt i en lengre periode og batteriene har blitt helt utladet, kan mottakeren indikere en feil når laderen settes inn. Ladingen kan som regel startes igjen på korrekt måte ved å la laderen være tilkoblet i 30 minutter og deretter ta den ut og sette den inn på nytt.

4.4 Mottakerfunksjoner

Alert-iT-mottakeren er utformet spesielt for bruk i hjemmet og i profesjonelle pleiemiljøer.

De spesifikke funksjonene for dette er:

- stor bakgrunnsbelyst skjerm med detaljerte alarmindikasjoner
- tilbakestilles ved kilden for full etterlevelse av pleieplikten
- lang radiorekkevidde
- lang batteritid som dekker mer enn 24 timers kontinuerlig bruk på én lading
- alarmer med tre alvorlighetsnivåer (pluss feilindikasjon)
- kan konfigureres for individuell bruk eller gruppebruk
- hørbare toner med justerbart volum som angir alvorlighetsnivå
- enkel omprogrammering av enhetens navn og plassering

Ved normal bruk har alle pleiere en svært enkel prosedyre:

- Mottakeren indikerer plasseringen og alvorlighetsnivå for en alarm.
- Indikasjonen kan ledsages av et hørbart varsel og/eller vibrasjon.
- Pleieren kan midlertidig slå av lyd/vibrasjon med ett tastetrykk.
- Pleieren ser til pasienten og tilbakestiller alarmen på pasientens rom.
- Mottakeren tilbakestilles automatisk.

Det finnes noen svært enkle grunnleggende parametere som pleieren kan endre, avhengig av tilgangsnivået som er autorisert av lederen.

Alle brukere kan

- tilbakestille alarmer som kan ha hengt seg opp hvis enheten er skadet eller ikke lenger er på stedet

Hvis det er tillatt, kan brukeren

- endre grunnleggende grensesnittfunksjoner som skjermens lysstyrke og tastelyd
- veksle mellom innstilling for Standard og Diskret volum og vibrasjon
- legge til, fjerne og redigere parede enheter

Som standard kan brukere **slå av** mottakeren, men kan ikke bruke **Administrer enheter**.

Merk:

Muligheten til å slå av mottakeren kan skjules fra menyen ***Brukerinnstillinger*** *via skjermbildet* ***Avansert > Flere innstillinger*** > **Bruker***, ved å sette* ***Slå av*** *til* ***Avslå****.*

Muligheten til å administrere parede enheter kan skjules fra menyen ***Brukerinnstillinger*** *via skjermbildet* ***Avansert > Flere innstillinger*** > **Bruker***, ved å sette* ***Administrer enheter*** *til* ***Skjul****.*

4.5 Alarmvarsler



Når et alarmvarsel mottas, avgir mottakeren en hørbar alarmtone og/eller vibrerer. Skjermen vekkes automatisk og viser årsaken til alarmen.

Alarmvarslet viser:

- navnet til enheten
- plasseringen til enheten
- typen enhet som sendte alarmen
- alarmtilstanden som enheten har oppdaget
- forløpt tid siden mottakeren mottok alarmen

Alarmvarsler rangeres etter prioritet, så hvis flere alarmer er aktive, vises alarmer med høyere prioritet foran varsler med lavere prioritet.

Alarmprioritet angis av fargen på alarmens ramme:

- høy prioritet = rød ramme
- middels prioritet = oransje ramme
- lav prioritet = gul ramme
- feil = grå ramme

Ventende alarmvarsler kan enten **godkjennes** eller **slumres**.

Merk[1]: Når du ***godkjenner*** *en alarm, slår du av lyden for alarmen på alle andre mottakere som er paret med den enheten.*

Merk[2]: Hvis mottakeren bare er koblet til én enhet, vises ikke alternativet ***Slumre*** *og ingen varsler kan slumres.*

Hvis du velger **Godkjenn** eller **Slumre**, dempes varslet i **5 minutter**.

Merk[3]: Denne tidsperioden kan justeres i innstillingsmenyen.

Kun tilgjengelig på 128-kanals mottaker:

Når du har satt **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Avansert** > **Tilkalle assistanse** til **Tillat**: Velg **Godkjenn** for å tillate at brukeren kan tilkalle ytterligere assistanse ved å trykke på knappen ***Assistanse***. Dette varsler andre mottakere om at ytterligere assistanse er nødvendig.

4.6 Tilbakestille alarmer

Alert-iTs enheter har vanligvis funksjonen **Tilbakestilling ved kilden**. Dette betyr at brukeren må gå til pasientens plassering for å tilbakestille enheten og fjerne alarmen fra mottakeren.

4.7 Alarmvarighet

Alarmvarslet på mottakeren viser **varigheten** siden alarmen ble mottatt av mottakeren.

Det er ofte nyttig å vite hvor lenge pasienten har vært i en belastet tilstand. Når alarmen tilbakestilles på enheten, fjernes alarmvarslet fra mottakerskjermen, varighetstidtakeren stoppes og hendelsen lagres i alarmhistorikkloggen.

Hvis det er ønskelig å vite hvor lenge alarmtilstanden er aktiv, bør ikke brukeren tilbakestille alarmen når de ser til pasienten. I stedet bør brukeren slå av lyden for alarmen på mottakeren ved å trykke på knappen **Godkjenn**, se til pasienten, kontrollere pasientens tilstand og deretter notere **Forløpt tid** når alarmtilstanden opphører før enheten tilbakestilles.

4.8 Bruk av Standard og Diskret modus

Mottakeren kan veksles mellom **Standard** og **Diskret** modus på startskjermen via funksjonstasten ved siden av ikonet. Dette bytter raskt mellom to konfigurerbare innstillinger for volum og vibrasjon.

4.9 Feilsikker radio

Mange av Alert-iTs sikkerhetskritiske enheter har en funksjon kalt **Securelink** aktivert.

I denne modusen avgir enheten jevnlige radiooverføringer for å danne en feilsikker «puls» som gjør det mulig for alle mottakerenheter å varsle pleieren hvis de er utenfor området, eller dersom enheten av en eller annen grunn skulle svikte.

Hvis mottakeren er paret med en enhet med **Securelink** aktivert, utløser den en **Radioforbindelse**-feil hvis den ikke har mottatt noen radiosignaler på **2 minutter**.

Denne feilen utløses vanligvis av følgende årsaker:

- Mottakeren er utenfor senderens rekkevidde.
- Senderen er slått av.
- Senderen har en feil og fungerer ikke korrekt.

Hvis radiorekkevidde er et problem, kan radiorepeatere brukes til å utvide systemets radiorekkevidde.

Flere radiorepeatere kan seriekobles for å utvide rekkevidden enda mer.

5 FØRSTEGANGSOPPSETT

5.1 Bruk av belteklips og halssnor

Mottakeren leveres med en avtakbar belteklips og halssnor som kan brukes til å feste mottakeren til brukerens klær.





5.2 Lading

Mottakeren må lades før første gangs bruk.

Mottakeren kan lades med en USB Type-C-lader.

Typisk ladetid er 2–3 timer.

Merk: Noen USB-porter kan ikke levere tilstrekkelig strøm til å lade mottakeren. Mottakeren må være koblet til en USB-lader som kan levere minst 500 mA. Mottakeren registrerer dette automatisk og forhindrer lading dersom den kobles til en port som ikke kan levere dette.

5.3 Rekkeviddetesting

Det er viktig å kontrollere at alle enheter når mottakeren med radiosignalet sitt. I helsekritiske situasjoner må enheten konfigureres til å fungere i Securelink-modus (feilsikker modus). Se instruksjonene for den enkelte enheten for hvordan dette aktiveres.

6 GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

6.1 Slå på mottakeren

Slik slår du på mottakeren:

- Hold inne en knapp i tre sekunder.

Ved oppstart vises programvareversjon, antall kanaler og radiofrekvens i 10 sekunder på mottakerens skjerm.

Merk: Datoen og klokkeslettet forsvinner dersom batteriene tas ut over en lengre periode. Alle loggføringsfunksjoner stoppes frem til dato og klokkeslett stilles inn igjen via menyen ***Avanserte innstillinger****.*

6.2 Vekke skjermen

Skjermen slår seg av etter en kort stund uten aktivitet, for å spare strøm.

Slik vekker du skjermen:

- Trykk kort på **hvilken som helst knapp** for å vekke skjermen.

Merk: Skjermens tidsgrense kan justeres i menyen Avanserte innstillinger.

6.3 Slå av mottakeren

Slik slår du av mottakeren:

- Vekk skjermen ved å trykke kort på **hvilken som helst** knapp.
- Trykk på venstre valgtast for å åpne innstillingsmenyen.
- Bruk tastaturet til å velge **Brukerinnstillinger** eller **Avanserte innstillinger**.
- Bla ned til du ser **Slå av**.
- Trykk på høyre valgtast for å slå av mottakeren.

Merk: Muligheten til å slå av mottakeren kan skjules fra menyen ***Brukerinnstillinger*** via skjermbildet ***Avansert*** > ***Flere innstillinger*** > **Bruker***, ved å sette* ***Slå av*** *til* ***Avslå****.*

6.4 Reagere på alarmvarsler

Når et alarmvarsel mottas, avgir mottakeren en hørbar alarmtone og/eller vibrerer. Skjermen vekkes automatisk og viser årsaken til alarmen.

Hvis brukeren skal se til pasienten, kan vedkommende dempe alarmen ved å trykke på knappen **Godkjenn**. Eller brukeren kan trykke på knappen **Slumre** dersom de er opptatt med en annen alarm, eller hvis noen andre ser til pasienten.

Merk: Hvis bare én enhet er paret med mottakeren, er knappen ***Slumre*** *skjult.*

7 TILLEGGSFUNKSJONER

7.1 Tilbakestille alarmer fra utilgjengelige enheter

Hvis en enhets **Tilbakestill**-knapp ikke er tilgjengelig for å kvittere ut en alarm, eller hvis en paret enhet er slått av og er konfigurert til å sende feilvarselet **Enhet av**, kan du fjerne alle aktive alarmer ved å

- trykke på venstre valgtast for å åpne menyen
- trykke på firkantknappen for å velge **Brukerinnstillinger** eller **Avanserte innstillinger**
- bruke tastaturet til å bla ned til du ser **Tilbakestill alle alarmer**
- trykke på den firkantede knappen for å velge, og deretter trykke på høyre knapp for å fjerne eventuelle aktive alarmer fra mottakeren

Merk: Hvis enheten fortsatt er slått på og i alarmtilstand, vil mottakeren alarmere på nytt innen ~2 minutter for enheter uten Securelink eller ~10 sekunder for enheter med Securelink aktivert.

7.2 Kommunikasjon mellom mottakere (kun tilgjengelig på 128-kanals mottaker)

Mottakeren kan kommunisere godkjenning av alarmanrop til andre mottakere innen rekkevidde.

Aktiver ved dette ved å

- sette hver mottaker til en unik radio-ID i **Avansert** > **Innstillinger for mottakere** > **Mottakeradresse**

Hvis en bruker trykker **Godkjenn** når dette er aktivert, viser alle andre mottakere innen rekkevidde teksten **Godkjent** nedenfor alarmen.

7.3 Assistanseanrop (kun tilgjengelig på 128-kanals mottaker)

I miljøer med flere mottakere kan du tillate at brukeren tilkaller assistanse for et bestemt varsel.

Merk: Andre mottakere vil bare motta dette assistansevarselet, sammen med plasseringen til den enheten, hvis den mottakeren også er paret med enheten (enten i aktivert eller deaktivert tilstand).

Aktiver ved dette ved å

- sette hver mottaker til en unik radio-ID i **Avansert** > **Innstillinger for mottakere** > **Mottakeradresse**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Avansert** > **Tilkalle assistanse** til **Tillat**

Når dette er aktivert, kan brukeren utløse et assistanseanrop ved å

- trykke **Godkjenne** på et varsel
- deretter trykke **Assistanse** på varselet

Avbryt ved å

- trykke på knappen ~~**Assistanse**~~

7.4 Hjelp-anrop (kun tilgjengelig på 128-kanals mottaker)

I miljøer med flere mottakere kan du tillate at brukeren sender et generelt **hjelp**-anrop til andre mottakere i området dersom vedkommende trenger assistanse.

Merk: Hjelp-anrop må også være aktivert på alle de andre mottakerne du ønsker skal motta hjelp-anropet.

Aktiver ved dette ved å

- sette hver mottaker til en unik radio-ID i **Avansert** > **Innstillinger for mottakere** > **Mottakeradresse**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Avansert** > **Tilkalle hjelp** til **Tillat**

Når dette er aktivert, kan brukeren utløse et hjelp-anrop ved å:

- trykke på en knapp for å vekke skjermen
- holde inne den midtre valgknappen i **5 sekunder**, og deretter trykke på knappen øverst til høyre for å bekrefte

Avbryt anropet ved å:

- trykke på knappen **Avbryt**

8 ANBEFALTE KONFIGURASJONER

På grunn av det store mangfoldet av miljøer mottakeren brukes i, er det viktig at leder/primærpleier konfigurerer mottakeren riktig for sitt miljø.

Følgende avsnitt beskriver typiske miljøer og foreslåtte innstillinger som bør konfigureres.

Muligheten til å **slå av** mottakeren og til å administrere parede enheter kan skjules fra menyen **Brukerinnstillinger** via innstillingsmenyen **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker**.

8.1 Bolig med én enhet

Vi anbefaler at du vurderer å

- stille inn dato og klokkeslett for å aktivere loggføringsfunksjonene
- å sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker** > **Administrer enheter** til **Vis**

8.2 Mindre pleieinstitusjon med flere enheter og én mottaker

Vi anbefaler at du vurderer å

- stille inn dato og klokkeslett for å aktivere loggføringsfunksjonene
- sette **Avansert** > **Innstillinger for mottakere** > **Visningsmodus** til **Ny først**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker** > **Administrer enheter** til **Skjul**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker** > **Slå av** til **Avslå**
- Endre standardpassordet for å hindre tilgang til menyen for avanserte innstillinger hvis standardpassordet er kjent.

8.3 Mellomstor pleieinstitusjon med flere enheter og flere mottakere

Vi anbefaler at du vurderer å

- stille inn dato og klokkeslett for å aktivere loggføringsfunksjonene
- sette **Avansert** > **Innstillinger for mottakere** > **Visningsmodus** til **Prioritet**
- kun pare mottakeren med enheter som brukeren av denne mottakeren skal reagere på
- pare mottakeren med enheter i deaktivert tilstand (se **avsnitt 9.5**), slik at assistanseanrop gir plasseringsinformasjon
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker** > **Administrer enheter** til **Skjul**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker** > **Slå av** til **Avslå**
- endre standardpassordet for å hindre tilgang til menyen for avanserte innstillinger

Kun tilgjengelig på 128-kanals-mottaker:

- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Avansert** > **Tilkalle assistanse** til **Tillat**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Avansert** > **Tilkalle hjelp** til **Tillat**
- sette **Avansert** > **Flere innstillinger** > **Bruker** > **Tilkalle assistanse** til **Tillat**

9 PARE ENHETER

9.1 Oversikt over paring

Mottakeren er vanligvis forhåndsparet med enhetene som følger med når den leveres som et system, men hvis det kreves flere enheter, eller hvis du har en erstatningsmottaker, må du pare enheten med mottakeren før bruk.

Enheter som slås av i løpet av dagen for å hindre uønskede alarmer, kan deaktiveres på mottakeren (se **avsnitt 9.5**).

9.2 Forstå navn og plasseringer



For å gjøre det enklere å identifisere kilden til alarmen kan hver enhet merkes med et **Navn** og en **Plassering**.

Du kan selv bestemme hvordan enhetene best grupperes, for eksempel:

- For én bruker med flere enheter
  - Navn: John Plassering: Soverom
  - Navn: John Plassering: Stue
  - Navn: John Plassering: Bad
- For flere brukere på samme sted:
  - Navn: John Plassering: Stue
  - Navn: Janne Plassering: Stue
- For enheter som ikke er tildelt brukere:
  - Navn: Pleieavdelingen Plassering: Ytterdør

9.3 Legge til en ny enhet

- Velg **Administrer enheter** fra menyen.
- Trykk på +-knappen.
- Skriv inn et **Navn**.
- Velg navnet fra listen **Navn**.
- Trykk på +-knappen for å legge til en enhet.
- Skriv inn en **Plassering**.
- Skriv inn **Radio-ID**.
- Velg enhetens **Type** fra rullegardinlisten.
- Trykk på **hakeknappen** for å lagre enheten.

9.4 Fjerne en enhet

- Velg **Administrer enheter** fra menyen.
- Trykk på den midtre knappen for å velge **navnet** på enheten du vil slette.
- Trykk på den midtre knappen for å velge **enheten** du vil slette.
- Trykk på -knappen for å fjerne enheten.
- Trykk på **hakeknappen** for å bekrefte.

9.5 Deaktivere en enhet

Hvis du vil slutte å bruke en enhet midlertidig, kan du sette alternativet **Alarmstatus** for den aktuelle enheten til **Av** i menyen **Administrer enheter**.

10 BATTERISTATUS OG LEVETID

Mottakeren drives av 2 stk. oppladbare AAA-batterier av høy kvalitet, 1,2 V Ni-MH, som normalt skal vare i flere år før de må skiftes.

Batteritiden vil variere mellom 24 og 40 timer avhengig av hvilke funksjoner som er aktivert, hvor ofte alarmer oppstår og hvor raskt det reageres på alarmer. Skjermens bakgrunnsbelysning er den funksjonen som bruker mest strøm.

Når batteriet når et lavt nivå, vises advarselen **Lavt batterinivå** på skjermen. Mottakeren må lades så snart som mulig.

Når batteriet når et svært lavt nivå, vises advarselen **Kritisk batterinivå** på skjermen, og et varsel lyder hvert 10. sekund i 10 minutter. Etter 10 minutter med advarselen **Kritisk batterinivå** slås mottakeren av automatisk.

⚠ Når advarselen **IINGEN ALARMER – LAD NÅ** vises, mottas ikke lenger pasientalarmer, og mottakeren må lades umiddelbart!

⚠ Når advarselen **IINGEN ALARMER – LAD NÅ** vises, må mottakeren lades i minst 2 timer for å lade batteriene helt opp igjen.

⚠ Koble fra alle ladekabler før batteridekselet åpnes.

Merk[1]: Hvis batteriene tas ut, må dato og klokkeslett må stilles inn på nytt før noen loggføringsfunksjoner gjenopptas.

Merk[2]: Dato og klokkeslett må også stilles inn på nytt hvis batteriene har vært i kritisk tilstand i mer enn 1 til 2 uker.

Se avsnitt 4.2 og 4.3 for mottakerens oppførsel under lading.

11 AVANSERT MENY > INNSTILLINGER FOR MOTTAKERE

Følgende avsnitt gir veiledning om innstillingene i menyen **Avansert** > **Innstillinger for mottakere**.

Lysstyrke

Dette justerer skjermens lysstyrke for den modusen som er valgt for øyeblikket (Standard/Diskret). Merk at høyere lysstyrke vil redusere batteritiden.

Tastelyd

Dette er en hørbar lyd som produseres hver gang det blir trykket på en knapp på tastaturet i standardmodus.

Vis info

Dette skjermbildet viser grunnleggende informasjon om enheten og kan være nyttig under supportsamtaler for å identifisere enheten og programvareversjonen som kjøres.

Mottakerens navn

Et mottakernavn kan konfigureres for å bidra til å identifisere mottakeren. Dette navnet vises i tittellinjen på hovedstartskjermbildet. F.eks. **Dag**-/**nattmottaker**.

Dato og klokkeslett

Mottakeren har to logger: En **alarm- og feilhistorikk** og en **systemhistorikk**.

Merk: Loggføring krever at dato og klokkeslett er stilt inn før loggingen kan starte. Hvis disse loggene ikke er nødvendige, trenger ikke dato og klokkeslett å stilles inn.

Standard og diskret modus

Her kan du justere innstillingene for volum og vibrasjon for hver av disse modusene.

Slumretimer

Denne innstillingen konfigurerer hvor lenge mottakeren er lydløs når en alarm godkjennes eller slumres.

Snoozetid

Denne innstillingen konfigurerer hvor lenge mottakeren er lydløs når en feil avvises.

Skjermens tidsgrense

Denne innstillingen konfigurerer hvor lenge skjermen forblir på. Hvis denne økes, dvs. at skjermen er påslått lenger, reduseres batteritiden, spesielt i travle miljøer der det er hyppige alarmer.

Visningsmodus

Dette alternativet veksler mellom:

- **Prioritet**: Alarmer med høyest prioritet vises øverst.
- **Ny først**: De nyeste alarmene vises øverst.

Passord

Standardpassordet for avanserte innstillinger er **1009**.

Passordet kan endres her om nødvendig.

Hvis passordet glemmes, må det brukes et program på en Windows-PC for å tilbakestille det.

12 RENGJØRING

Du kan rengjøre mottakeren med en fuktig klut, et nøytralt rengjøringsmiddel eller et mildt desinfiseringsmiddel.

Unngå å få væske inn i USB-kontakten eller lydgiveråpningen.

Koble alltid fra alarmsignalkabelen (hvis denne brukes) før rengjøring av enheten. Tørk alle deler godt etter rengjøring.

13 PRODUSENTENS ANSVAR

iTs Designs Ltd. (T/A Alert-iT Care Alarms) er ansvarlig for enhetens sikkerhet, pålitelighet og ytelse, forutsatt at

- enheten installeres, brukes og rengjøres i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen
- alle endringer på enheten, vedlikehold og reparasjoner utføres av en person som har fått opplæring av Alert-iT eller dets representanter
- alle reservedeler eller tilbehør som brukes, er godkjent av Alert-iT

14 KASSERING AV ENHETEN VED ENDT LEVETID

Enheten skal samles inn separat og leveres til et autorisert innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk avfall i samsvar med det europeiske direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet). Eieren av utstyret skal levere det inn på et innsamlingspunkt angitt av lokale myndigheter.

Hvis du vil ha mer informasjon om kassering av enheten, må du henvende deg til de lokale myndighetene.

15 SAMSVARSERKLÆRING

Produsenten, iTs Designs Ltd., erklærer med dette at produktet overholder kravene i forordning om medisinsk utstyr (EU) 2017/745 og forordning om medisinsk utstyr i Storbritannia fra 2002.

Produsenten, iTs Designs Ltd., erklærer med dette at produktet overholder forordningen om radioutstyr (Storbritannia) 2017 og radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU).

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

www.alert-it.co.uk/support/

Elektromagnetisk samsvar

- Oppfyller IEC 60601-1-2 punkt 4.3, 7 og 8.
- Strålingsklasse IEC 55011: Klasse B
- Immunitetstestnivå: 10 V/m Ytelseskriterium: B
- Strålingsgrenser og nivåer for immunitetstest anvendt for IEC 60601-1-11 miljø for helsehjelp i hjemmet.

16 RUTINEMESSIGE KONTROLLER

16.1 Daglige kontroller

Påslått

Vekk skjermen og kontroller at mottakeren er slått på før du starter vakten.

Batterinivå

Kontroller at batteriet er tilstrekkelig oppladet før du starter vakten.

Normal/diskret modus

Kontroller at mottakeren er i riktig modus før bruk.

16.2 Ukentlige kontroller

Tilstanden på kablene

Kontroller tilstanden på kablene.

Aktivering av alarm

Kontroller at pleieren(e) mottar alarmvarslingene. Utløs en alarm manuelt hvis nødvendig.

17 KLARGJØRING AV ENHETEN FØR GJENBRUK

Hvis du vil tilbakestille mottakeren til fabrikkinnstillingene, må du utføre følgende trinn:

Trinn 1) Fjern eventuelle parede enheter som beskrevet i avsnitt **9.4 Fjerne en enhet**.

Trinn 2) Åpne menyen **Avanserte innstillinger**, og velg **Tøm historikk**.

Trinn 3) Åpne menyen **Avanserte innstillinger**, og velg **Tilbakestill innstillinger**.

18 ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

Dersom produktet mot all formodning trenger garantiservice, må du kontakte leverandøren, distributøren eller produsenten. Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du ber om garantiservice, ettersom du da kan unngå bryderiet med å sende den til service.

DIN GARANTI

Gjennom denne garantien, garanterer Alert-iT at produktet er fritt for material- og konstruksjonsfeil på kjøpsdatoen og i en periode på tre (3) år fra denne datoen.

Hvis det fastslås at det er defekter på produktet som følge av material- eller konstruksjonsfeil i løpet av garantitiden (fra den opprinnelige kjøpsdatoen), vil Alert-iT erstatte produktet eller reparere de defekte delene uten kostnad for kunden og i henhold til vilkårene og begrensningene nedenfor. Alert-iT kan erstatte defekte produkter eller deler med nye eller renoverte produkter eller deler. Alle produkter som beholdes og deler som skiftes ut, eies av Alert-iT.

VILKÅR

Garantitjenester utføres bare ved fremlegging av den opprinnelige fakturaen eller kjøpskvitteringen (der kjøpsdato, modellnavn og forhandlerens navn er oppgitt) sammen med det defekte produktet innenfor garantiperioden. Hvis disse dokumentene ikke fremlegges, eller hvis de er ufullstendige eller uleselige, kan Alert-iT nekte å utføre garantiservice uten kostnad for kunden.

Denne garantien gjelder ikke hvis modellnavnet eller serienummeret på produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig.

Denne garantien dekker ikke transportkostnader og risikoer knyttet til transport av produktet til og fra Alert-iT.

Denne garantien dekker ikke:

a. fraværssensorer eller fuktsensorer (se garantier som gjelder for det enkelte produktet)

b. periodisk vedlikehold og reparasjoner eller utskifting av deler som følge av bruk og slitasje

c. forbruksvarer (komponenter som forventes å kreve periodisk utskiftning i løpet av produktets levetid, som batterier)

d. skader eller defekter som forårsakes av bruk, betjening eller behandling av produktet som ikke samsvarer med normal bruk

e. skader eller endringer på produktet som følge av:

   i. feilbruk eller misbruk, inkludert:

      – behandling av produktet på en måte som fører til fysiske-, kosmetiske- eller overflateskader eller skader på produktet

      – installasjon eller bruk av produktet på en annen måte enn for produktets normale formål, eller på en måte som avviker fra instruksjonene fra Alert-iT eller i bruksanvisningen

      – manglende vedlikehold i henhold til instruksjonene fra Alert-iT eller i bruksanvisningen

      – installasjon eller bruk av produktet som ikke er i tråd med tekniske eller sikkerhetsmessige lover eller standarder i landet der det installeres eller brukes

   ii. tilstanden på, eller defekter i systemer, som produktet brukes sammen med eller innlemmes i, bortsett fra andre produkter fra Alert-iT som er beregnet på å brukes sammen med produktet

iii. bruk av produktet sammen med tilbehør eller periferiutstyr og andre produkter av en annen type, tilstand eller standard enn som oppgitt av Alert-iT

iv. reparasjoner eller forsøk på reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av Alert-iT

v. justeringer eller tilpasninger uten skriftlig forhåndstillatelse fra Alert-iT, inkludert:

– oppgradering av produktet utover spesifikasjonene eller funksjonene beskrevet i bruksanvisningen, eller modifiseringer på produktet for å sikre samsvar med lokale tekniske krav eller sikkerhetsstandarder i andre land enn de landene produktet er spesifikt utformet og produsert for

vi. uaktsomhet

vii. ulykker, brann, væsker, kjemikalier, andre stoffer, oversvømmelser, vibrasjoner, kraftig varme, for høy eller feil forsynings- eller inngangsspenning, stråling, elektrostatiske utladninger, inkludert lynnedslag, andre eksterne krefter og påvirkninger

Denne garantien gjelder bare maskinvarekomponentene i produktet.

UTELUKKELSER OG BEGRENSNINGER

Bortsett fra som angitt over, gir Alert-iT ingen garantier (uttrykt, innforstått, lovfestet eller på annen måte) vedrørende produktet og medfølgende eller iboende programvare når det gjelder kvalitet, ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet for et bestemt formål eller på annen måte. Hvis denne utelukkelsen ikke er tillatt eller fullstendig tillatt av gjeldende lov, utelukker eller begrenser Alert-iT sitt garantiansvar til kun i den grad som er maksimalt tillatt av gjeldende lov. Alle garantier som ikke fullstendig kan utelukkes, begrenses (i den grad gjeldende lov tillater det) til varigheten av denne garantien.

Alert-iTs eneste forpliktelser under denne garantien er å reparere eller erstatte produkter som er underlagt disse garantivilkårene og -betingelsene. Alert-iT er ikke ansvarlig for tap eller skade relatert til produktene, tjenestene, denne garantien eller på annen måte, inkludert økonomiske eller uhåndgripelige tap, prisen som ble betalt for produktet, tap av profitt, inntekter, data, benyttelse eller bruk av produktet eller ethvert tilknyttet produkt, indirekte eller tilfeldige skader, følgeskader eller skader på eiendom. Dette gjelder hvorvidt dette tapet eller skaden er relatert til: redusert eller manglende evne til å bruke produktet eller tilknyttede produkter på grunn av defekter eller manglende tilgjengelighet mens det befinner seg hos Alert-iT, som forårsaket driftsstans, tap av brukerens tid, forretningsavbrudd eller unøyaktige signaler fra produktet eller tilkoblede produkter.

Dette gjelder tap og skader på eiendom under enhver juridisk teori, inkludert uaktsomhet og andre skadevoldende handlinger, kontraktsbrudd, uttrykt eller stilltiende garanti og erstatningsansvar (også i tilfeller der Alert-iT er informert om muligheten for at slike skader kan forekomme).

Der gjeldende lov forbyr eller begrenser slike utelukkelser, utelukker eller begrenser Alert-iT sitt ansvar til kun i den grad som er maksimalt tillatt av gjeldende lov. Enkelte land forbyr for eksempel utelukkelse eller begrensning av skader som oppstår som følge av uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsettlig forsømmelse, bedrageri og lignende handlinger. Alert-iTs erstatningsansvar under denne garantien vil ikke under noen omstendigheter overskride prisen som ble betalt for produktet, men dersom gjeldende lov bare tillater høyere begrensninger for erstatningsansvar, skal disse høyere begrensningene gjelde.

FORBEHOLDT DINE JURIDISKE RETTIGHETER

Forbrukere har juridiske (lovfestede) rettigheter i henhold til relevante, nasjonale lover vedrørende salg av forbrukerprodukter. Denne garantien påvirker ikke disse lovfestede rettighetene du muligens har, eller rettigheter som ikke kan utelukkes eller begrenses, eller rettighetene du har overfor personen du kjøpte produktet av. Du kan etter eget skjønn utøve rettighetene du måtte ha.

19 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utstyret er beregnet på kontinuerlig bruk.

Kontrollenhet

Modell:	P202
Batterier:	2 stk. 1,2 V Ni-MH oppladbare 800 mAh AAA-batterier (HR03)
Batteritid:	Opptil 40 timer (typisk 24 til 36 timer)
Strøminngang:	5 V DC ved 500 mA
Ladetid:	~2 timer
Innganger og utganger:	USB Type-C (strøm- og dataport)
Brytere og kontroller:	Tastatur med 7 trykknapper
Signallys:	Strømstatus (rød/grønn) Enhetsstatus (rød/gul/grønn) Mottakerstatus (rød/grønn)
Nivåområde for lydtrykk:	50–54 dBA ved 1 m
Forsinkelse fra ALARM TILSTAND til SIGNALUTGANG:	< 1 s
Maksimal ekstern ALARM FORSINKELSE SIGNALGENERERING:	< 1 s
Minnelagring:	Hele minnet bevares ved strømtap
Mål:	122 x 72 x 20 mm (HxBxD)
Vekt:	160 g (inkludert batterier)
Farge:	Hvit
Kabinett:	ABS-plast
IP-kapslingsgrad:	IP64
Levetid:	5 år

Radiofrekvens:	434,0750 MHz
Radioutgangseffekt:	< 10 mW
Radiorekkevidde:	450 meter (fri sikt)
Eller	
Radiofrekvens:	869,2125 MHz
Radioutgangseffekt:	< 10 mW
Radiorekkevidde:	450 meter (fri sikt)

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur:	5–40 °C (innendørs bruk)
Fuktighetsgrense:	5–90 % maks. Ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk:	700 hPa til 1060 hPa
Lagringstemperatur:	-30 til 50 °C

ITs Designs Ltd,
T/A: Alert-iT Care Alarms
Fernie House (Unit 3)
Coalville Business Park
Jackson Street
Leicester, UK
LE67 3NR

www.alert-it.co.uk

EU REP

Leisner ApS
Korsvangcentret
DK- 5610 Assens
Denmark

Hvis du trenger brukerstøtte, må du kontakte leverandøren av utstyret.

Importøren i EU må legge til informasjon her, hvor relevant.