




Upptäck något bättre

Mount'n Mover  
monteringsystem

**Mount'n Mover**<sup>™</sup>  
by BlueSky Designs

[mountnmover.com](http://mountnmover.com)

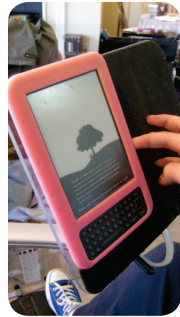

"Det placerar mitt tangentbord och mus precis där jag behöver dem. Jag behöver inte sträcka mig. Ett stycke ingenjörskonst...en snygg design" – Mark

"Jag gillar det här fästet eftersom det är så mångsidigt...och jag kan flytta undan det för att komma åt mitt skrivbord eller handfat." – Jim

## Funktion

Intuitivt och ändamålsenligt. Mount'n Mover kombinerar en modern och snygg design med teknisk uppfinningsrikedom. Det är en listig förlängning av dina dagliga aktiviteter.

## Rörelsefrihet

Mount'n mover lutar, roterar och justeras så som du vill. Vare sig du flyttar dig från rum till rum eller ska ut på stan. På ett bekvämt sätt hjälper det också till att hålla ett fritt synfält.

## Snabb förvandling

Oavsett vad dina behov är, kan du snabbt byta ut dina personliga enheter på Mount'n Mover - från en bricka för böcker och samtalsapparater till en laptop eller surfplatta.

"Med Mount'n Mover har jag förvandlat min rullstol till ett rullande stativ. Jag kan fokusera på att ta vackra foton och inte vara upptagen med att hålla kameran stadigt."

– Loren



## Enkelt att installera

Enkla instruktioner för Mount'n Mover enkelt att arbeta med för både terapeuter och vårdgivare - från enkel och dubbel arm till golvstativ. Självständigheten är din på några minuter.

# Välj din Mount'n Mover

Enkel åtkomst till telefoner och anordningar i alla storlekar.




Använd det för mer än ett syfte!




Justerbara inställningar med minne, möjliggör anpassad och konsekvent positionering.


Varje led ger upp till 12 möjliga läsbara positioner.

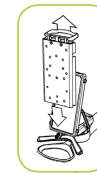

Snabbfästet gör att du snabbt och enkelt både kan sätta fast och ta loss olika enheter från stativet

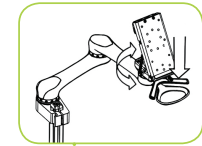

Paddeln låser upp leden så att du enkelt kan rotera en bricka eller enhet

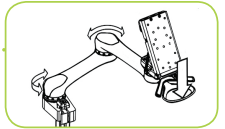

Handtaget låser upp både den mellersta och bakre leden för att lätt förflytta mellan olika användarlägen.



Justera lutning: en lätt sidorörelse låser upp lutningen.

## Tilt'n Turner

- 1 roterande led
- Justerbar vinkel
- 12 läsbara positioner
- Mycket kompakt
- Placera framför armstödet

Art.nr. 461052


Tips: lägg till en extra enhet till Dual eller Single Mount'n Mover - skapa en dubbeldäckare! (Se sid.8)



## Single Arm

- 2 roterbara leder
- 144 läsbara positioner
- Enkel att flytta
- Mer kompakt än Dual arm

Art.nr. 461051

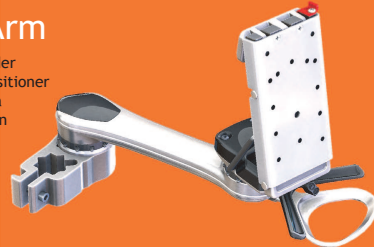

## Dual Arm

- 3 roterbara leder
- 1728 läsbara positioner
- Lättast att flytta
- Mest mångsidig
- Kräver kort räckvidd

Art.nr. 461050



# Sätt fast din samtalsapparat



## Montera enkelt

Monteringsplattor har utvecklats för att sätta fast samtalsapparater på Mount'n Movers snabbfäste. Vanliga apparater finns i tabellen nedan. Det finns fler alternativ, inklusive specialanpassade plattor.

## Byt apparater snabbt

Snabbfästet är nyckeln till ett enkelt system av utbytbara enheter. Köp en platta i tabellen nedan för att montera din apparat på snabbfästet. Ett snabbfäste medföljer varje Mount'n Mover.

### Finn monteringsplatta för din apparat


TILLVERKARE:	MODELL:	PLATTA:
Abilia	Rolltalk	Art.nr. 461078
Toby Churchill	Lightwriter	Art.nr. 461079
Dynavox	Maestro, V, Vmax, M3, DV4, MT4, DynaWrite EyeMax	
Prentke Romich Co.	ECO2, ECOpoint, ECO-14, Vanguard, Pathfinder 2 Vantage Lite, Springboard Lite	
Tobii	P10, C8, C12, CEye C15, VESA hole spacing	
AbleNet	FL4SH, Big Red, Big Mac	



Quick Release Plate  
(snabbfäste)

Ett snabbfäste ingår i varje Mount'n Mover. Beställ extra snabbfästen för att snabbt och lätt byta mellan flera enheter.

Art.nr. 461060

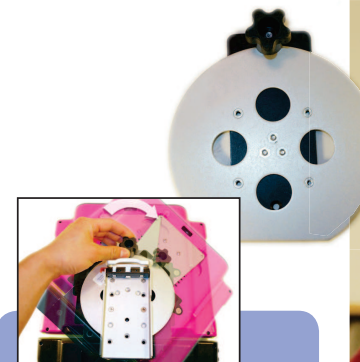

Universal Rotator

Ytterligare en grad av frihet! Oändlig vinkelplacering för ögonstyrning och iPads.

Art.nr. 461061

NY! Med Universal rotator kan du låsa din enhet i vilken vridning som helst.



# Brickor för allt



## 12"x16" Tray with Lip

- Kombibricka
- Perfekt för böcker och surfplattor
- Vinkla den platt och snurra på den för att skriva eller äta.

Art.nr. 461080  
inkl. Quick release Plate

Finns även utan QRP

## 12"x12" Tray

- Var kreativ!
- Sätt fast Velcro för att fästa en telefon eller surfplatta
- Skapa ett staffli med ett klipps på kanten
- Ställ dit en tallrik för att äta

Art.nr. 461081  
inkl. Quick release Plate

Finns även utan QRP



## Dubbeldäckare!

Skapa den perfekta uppsättningen. Här använder Nicole en Tilt'n Turner kombinerat med Dual Arm och ett Laptop Tray med 12x16 Tray. Mixa och matcha för att passa dina behov.



## Laptop Tray

- En mobil arbetsstation
- Rymmer de flesta bärbara datorer
- Fäster din bärbara dator med justerbara remmar och den bakre spärren
- Enkelt att ta bort din bärbara dator

Art.nr. 461086  
inkl. Quick release Plate

## Snabba och enkla byten.

På några sekunder kan Nicoles fästen växlas mellan brickor och andra enheter. Mount'n Mover är kända för sin flexibilitet och användarvänlighet.




## iPad Tray

- Få perfekt placering och tillgång till en iPad
- Växla enkelt mellan liggande och porträtt
- Inkluderar ett iPadfodral
- Använd andra surfplattor också! Ring oss!

Art.nr. 461082  
inkl. Quick release Plate


Finns även utan QRP

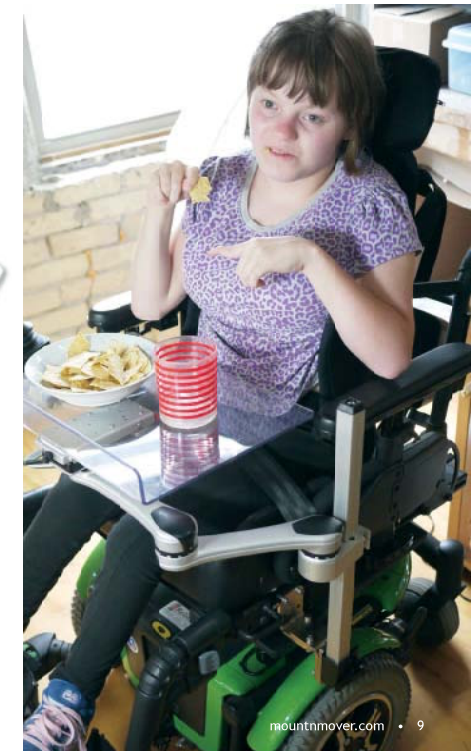

# Montera fästet på din rullstol

## Vi hjälper dig

Ring oss så hjälper vi dig att välja ut den lämpligaste monteringen för din rullstol. Från runda rör till monteringskenor, nivå eller vinklad, vi har delarna för att sätta fast din Mount'n Mover på din rullstol.

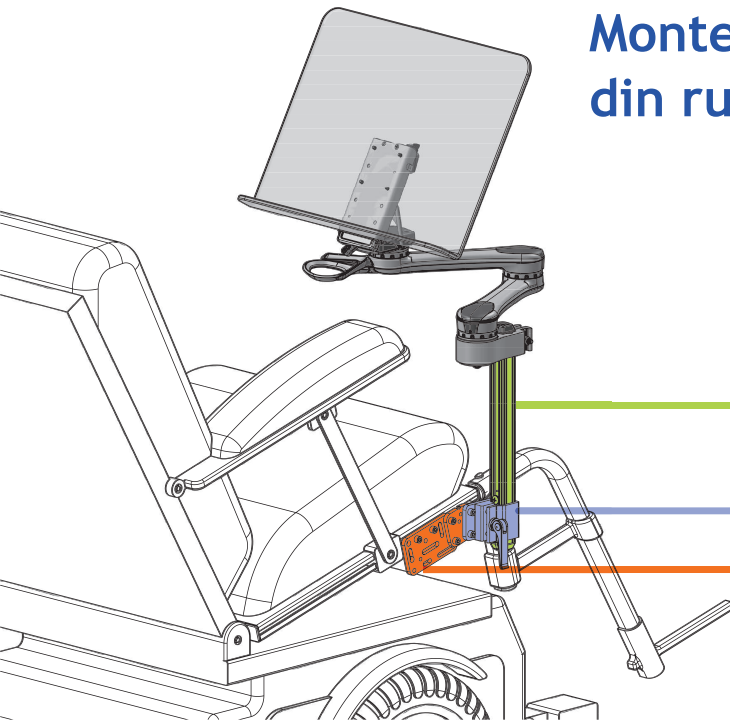


**Post**  
4 längder:  
8", 12", 18" och 24"  
  
Art.nr.  
461063 - 8"  
461064 - 12"  
461065 - 18"  
461066 - 24"



**Adjustable Wheelchair Bracket**  
• 360° rotation  
• Steg om 5°  
• Perfekt för stolar med sitstilt  
  
Art.nr. 461067



**Solid Wheelchair Bracket**  
• Styvaste sättet att fästa  
• Enkel och kompakt  
• Har två monteringsriktningar  
  
Art.nr. 461068

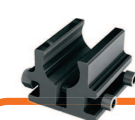

**Round Clamp**  
• Klämma för runda rör när bultning inte är ett alternativ  
• Välj mellan 1" eller 7/8"  
  
Art.nr.  
461069 - 1"  
461070 - 7/8"



**Round Bridge Clamp**  
Måste användas i ett par med AP2 eller AP4  
• Välj 1", 7/8" eller blandade par  
• Elimineras att det glider på röret om monterat i rätt vinkel  
  
Art.nr.  
461071 - 1" 461072 - 7/8"




**T-Nut**  
• Kompatibel med TDX och Quantum monteringskena  
  
Art.nr. 46107



**Adapter Plate**  
• Storlek 3" x 1.75" x 0.25"  
  
Art.nr. 461083



**Angle Adjustment Plate**  
• Tillåter styv montering för flera vinklar i steg om 7,5°  
• Kompatibel med WB2 och alla konsolmonteringsdelar  
  
Art.nr. 461074

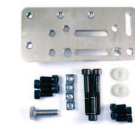

**Adapter Plate 2**  
• Storlek: 4,75" x 2,25" x 0,25"  
• Längre förlängning är AP4  
  
Art.nr. 461075




**Adapter Plate 4**  
• Storlek: 3,75" x 2,25" x 0,25"  
• Mer kompakt är AP2 möjliggör för 5/16" eller 8mm bultar  
  
Art.nr. 461076



**L-Angled Extension Plate**  
• Kan användas var för sig för att kompensera montering vid 90°, eller användas i par för att utöka montering från 2,25" till 4,5"  
• Helt kompatibel med alla monteringsdelar för rullstol  
  
Art.nr. 461077

## Bordsmontering

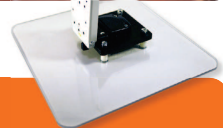

### Mount'n Tilter

- Gjord för placering på bord
- Lättvikt och bärbar
- Endast tillgänglig med lätt vridgångjärn

Art.nr. 461053  
inkl. Quick Release Plate

Finns även utan QRP



### Table Clamp

- Montera ditt fäste på ett bord!
- Snabb anpassning av vinkel, höjd och position
- Armen sträcker sig ut för enkel åtkomst med rullstol
- Genomför utprovnigar på ett enkelt sätt
- Klämmor för bord och brickor (1/22-3)
- Sätt fast ovanpå eller under bordet  
Flytta ett fäste från rullstol till bord

Art.nr. 461062



### Stand + 90°

Två produkter i en!  
Bordsstativ för maskiner eller brickor

- Använd vilken platta eller bricka som helst
- Lås på 0° och 55° på bord

Nedåtriktad lutning för monterade enheter

- Fäst mellan en platta eller bricka och Quick Release Plate
- Idealisk för åtkomst från säng
- Lås på 0°, 55° och 90°
- Använd vinkelspaken för att låsa i 0-180

Art.nr. 461054

## Tillgång till allt, överallt!

Flytta din Mount'n Mover från rullstolen till golvstativ på några sekunder.

Enkel åtkomst från säng!

### Floor Stands

Hjulalternativ:

- Alla modeller: två bakre "låstbaa" hjul, kan låsa hjulets vridning och rotation
- FS har två standardhjul (fasta)
- FS-4C har fyra länkhjul


Art.nr.

- 461055 Floor stand (FS)
- 461056 Floorstand with 4 swivel casters (FS-4C)
- 461057 Floorstand with extension (FS-E)
- 461058 Floorstand with extension and 4 swivel casters (FS-4C-E)



standardhjul

länkhjul

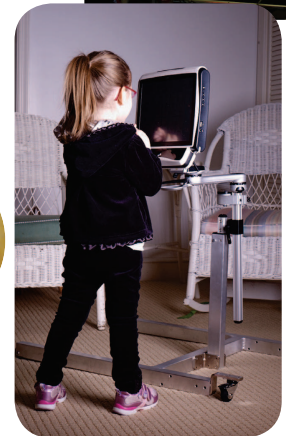

**Mount'n Mover™**  
by BlueSky Designs

 **mountnmover.com**  
BlueSky Designs, Inc. PH: 612-724-7002  
2637 27th Ave S, Suite 209  
Minneapolis, MN 55406-1564 USA  
info@blueskydesigns.us

**CE** QNET BV, Hommerterweg 286  
6436 AM Amstenrade, The Netherlands

**EC REP**

**mountnmover.com**

"Den bästa flyttbara  
monteringen någonsin."  
- Dan L.,  
leg. arbetsterapeut



PP-0003



Distribueras av:

Abilia PH: +46 (0)8-594 694 00

[www.abilia.se](http://www.abilia.se)

